

A-dec 200



a-dec®



# La diferencia de A-dec.

La mejor manera de averiguar qué necesitan los dentistas en un sillón y sistema dispensador es preguntárselo. Así que lo hicimos. El diseño de A-dec 200 refleja la manera en que trabajan los equipos dentales y, deliberadamente, brinda eficiencia en la práctica de la profesión. El sillón A-dec 200 refleja de forma integral la destreza y la calidad de la atención que brinda.



Respaldado por una garantía de 5 años.






A modern dental unit featuring a white, oval-shaped sink. Below the sink, a control panel holds five handpieces: a water spray nozzle, three different dental burs, and a control knob with a blue 'ardec' logo. A small rectangular screen is mounted on a stand behind the sink. The entire unit is supported by a metal frame.

Diseñado para durar.



**Luz genuina. Genuinamente confiable.** “Lo suficientemente bueno” no alcanza. En A-dec, diseñamos y probamos las luces para ofrecer una vida útil mínima de 20 años.

Cuando usted trabaja, su equipo tiene que funcionar. Por ello, A-dec se encarga de los procesos de fabricación, para poder ofrecer a los doctores el equipo más duradero y confiable. Por ejemplo, creamos y probamos cada cilindro del sillón de manera integral: desde la materia prima hasta el producto final, y ofrecemos el respaldo de una garantía de 10 años. También fabricamos nuestra propia manguera para sistema dispensador de alta calidad. Nuestros sistemas de producción se supervisan constantemente para que cumplan con los estándares de calidad de A-dec. La solución A-dec 200 le brinda un sistema fuerte y resistente diseñado para soportar años de uso constante.

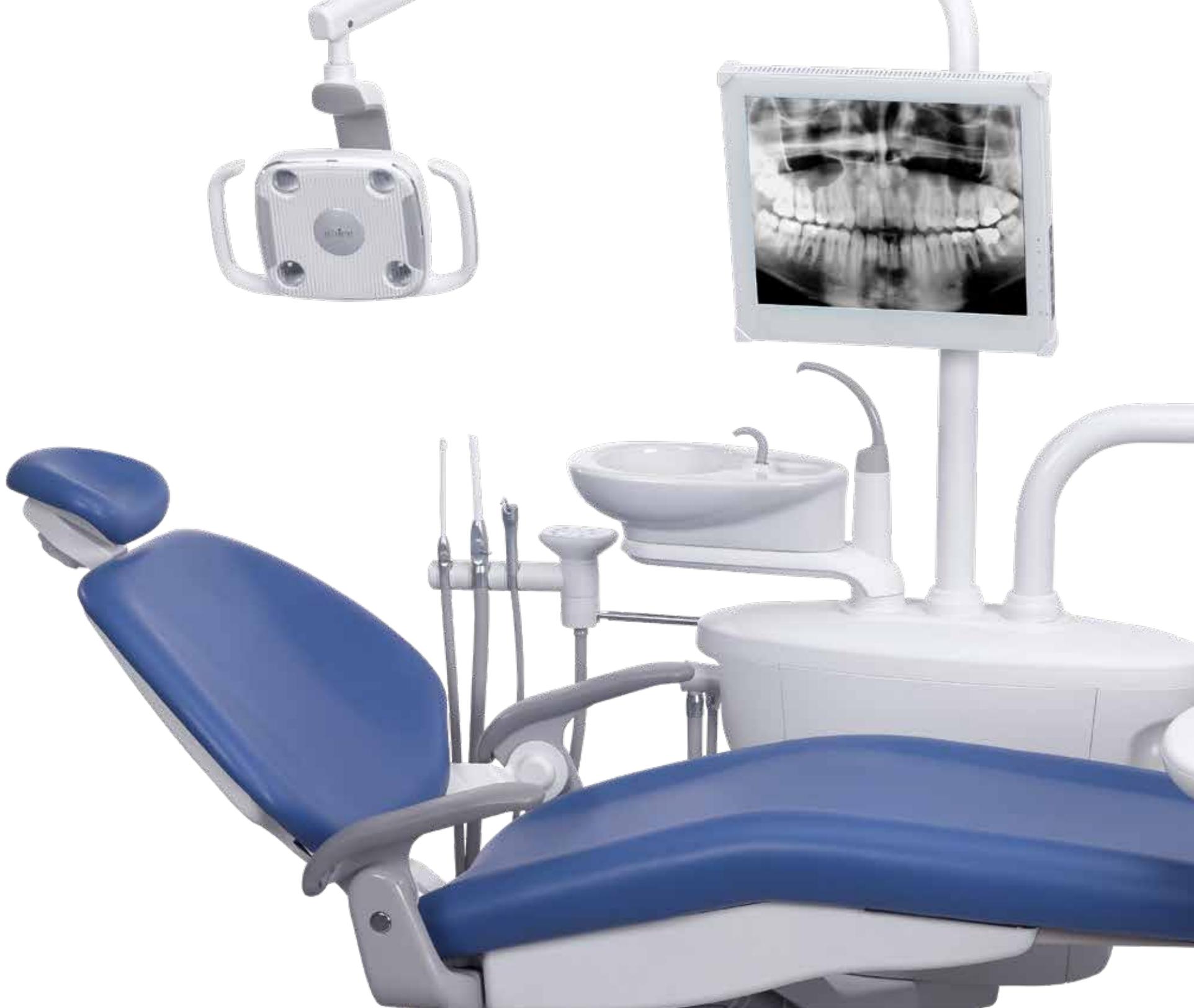

# Diseñado para rendir.

El A-dec 200 es un sistema que no está hecho solo para durar, sino también para crecer y desarrollarse a la par de su carrera profesional. Las funciones detalladas, como la escupidera resistente a las manchas que gira hacia el paciente, un brazo del asistente telescópico para trabajar a poca distancia y un panel táctil que integra las funciones de sillón, luz y escupidera, permiten mejorar el flujo de trabajo. Para realizar expansiones en el futuro, una plataforma abierta deja lugar para agregar o cambiar dispositivos auxiliares. Esto le permite obtener el mejor rendimiento ya mismo y durante años.



- La unidad de luz de tres ejes le permite posicionar la lámpara dental A-dec para el consultorio en el ángulo que resulte más adecuado para usted y su paciente.
- Las cuatro posiciones prefijadas del sillón le brindan mayor flexibilidad para posicionar al paciente.
- El espacio auxiliar le permite agregar nuevas tecnologías a medida que se desarrolla su carrera profesional.
- Los posabrazos de dos posiciones y la articulación del asiento brindan comodidad para el paciente.
- Las cubiertas contorneadas y las costuras mínimas facilitan y agilizan la limpieza.

## Sistema dispensador

Tenga a su alcance todo lo que necesita para acelerar el tratamiento.



A-dec 200



A-dec 300 Continental



A-dec 300 Traditional

## Panel táctil

El acceso táctil simplifica los ajustes del sillón y proporciona un acceso rápido al control de la lámpara dental y la escupidera. El panel táctil de lujo opcional añade controles para los dispositivos clínicos integrados, como motores eléctricos, cámaras y curetas.



Estándar



De lujo

## Controles de pie

Control con disco y botón soplador o control con palanca nuevo A-dec para un ajuste preciso de las piezas de mano eléctricas y manuales.



Control con disco y botón soplador



Control de pie con palanca

## Lámparas dentales

Las lámparas dentales A-dec ofrecen iluminación real para poder llegar a un diagnóstico preciso, reducir el cansancio de la vista y disfrutar de una ergonomía sin igual.



Lámpara halógena A-dec 200



LED A-dec 300



LED A-dec 500

## Montaje del monitor

El montaje del monitor se posiciona fácilmente sobre el paciente para la consulta y educación conveniente del paciente.



*A-dec 200 montaje del monitor*



*A-dec 300 montaje del monitor*

## Escupidera y centro de soporte

La escupidera de porcelana gira hasta encontrar la posición correcta del paciente. La botella de agua de dos litros se llena con facilidad y proporciona un suministro de agua continuo durante múltiples procedimientos. El centro de soporte ofrece un amplio espacio de almacenamiento para agregar accesorios como separadores de amalgama y sistemas de succión.



*Escupidera y centro de soporte*

## Instrumental del asistente

El brazo telescópico con soporte de tres posiciones permite colocar los instrumentos de vacío en forma adecuada, sin perder el acceso al paciente.



*A-dec (aluminio) con panel táctil*



*Durr (polímero) sin panel táctil*

## Tapizado sin costuras

Un ajuste moldeado al vacío de apariencia impecable y sin costuras visibles facilita la limpieza y el mantenimiento. *Consulte al distribuidor de A-dec autorizado para obtener muestras en color precisas y la información del producto más actualizada.*



*sky blue*



*indigo*




*sapphire*



*amethyst*



*lemongrass*

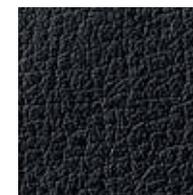

*black*



*paprika*



*tawny*

## Especificaciones

### Sillón dental A-dec 200

Rango de altura de elevación	400 mm a 730 mm (15,75 in a 28,75 in)
Respaldo flexible	55 mm (2,25 in), sin costura
Sistema de accionamiento	Base e inclinación hidráulicas
Interruptor de parada de base y respaldo del sillón	Sí, detiene el movimiento descendente cuando detecta una obstrucción
Apoyacabezas	Deslizamiento y articulación doble (estilo perilla)
Apoyabrazos	Pivotante
Suministro eléctrico de 300 vatios integrado	Sí
Interruptor de pie o panel táctil	Opcional
Capacidad de montaje	Flotante: montaje en poste de 2 in
Opciones de tapizado	Sin costuras

### Sistemas dispensadores

	<b>A-dec 200</b>	<b>A-dec 300 Continental</b>	<b>A-dec 300 Traditional</b>
Bloque de control	4 posiciones estándar	3 posiciones estándar, 4 posiciones opcional	3 posiciones estándar, 4 posiciones opcional
Conversión para mano izquierda/derecha	Sí	Sí	Sí
Opciones de conductos	Vinilo o silicona	Vinilo o silicona	Vinilo o silicona
Posiciones de soporte de las piezas de mano	4	4	4
Freno(s) de mano	N/D	1 estándar (2 opcionales)	1 estándar (2 opcionales)
Opciones de panel táctil	Ninguno, estándar o de lujo	Ninguno, estándar o de lujo	Ninguno, estándar o de lujo
Fuente de luz intrabucal de cuádruple voltaje	Opcional	Opcional	Opcional
Control de pie	Con disco y botón soplador o con palanca	Con disco, con disco y botón soplador, o con palanca	Con disco, con disco y botón soplador, o con palanca
Sistema de brazo	Brazo flexible balanceado	Brazo flexible balanceado con freno de aire Montaje de soporte A-dec 335	Brazo flexible balanceado con freno de aire Montaje de soporte A-dec 334





# Construyendo relaciones.

Las oficinas centrales de A-dec están ubicadas en Newberg, Oregón, EE. UU., pero nuestros clientes abarcan seis continentes, todos menos la Antártida. Los colegios y las instituciones de más de 85 países confían en los equipos de A-dec para superar las dificultades del uso continuo: día tras día, año tras año. Pero A-dec le ofrece más que un equipo de calidad. A-dec le brinda servicio técnico y soporte completos durante mucho tiempo después de la venta y la instalación. También le permite comunicarse con sus distribuidores locales y profesionales de servicio técnico, quienes responderán a sus necesidades para evitar los períodos de inactividad. Además, obtiene el beneficio de más de 50 años de experiencia para ayudarlo a crecer profesionalmente. Si le surge alguna pregunta, inquietud o una idea de mejora, nos encontramos a un llamado de distancia. Estamos aquí para ayudarlo a que se desempeñe exitosamente porque en A-dec no solo construimos equipos. Construimos relaciones.



#### Oficinas centrales de A-dec

2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132 EE. UU.  
Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá  
Tel: 1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá  
Fax: 1.503.538.0276  
a-dec.com

#### A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 dentro de Australia  
Tel: +61 (0)2 8332 4000 fuera de Australia

#### A-dec China

Tel: 400.600.5434 dentro de China  
Tel: +86.571.89026088 fuera de China

#### A-dec Reino Unido

Tel: 0800 233285 dentro del Reino Unido  
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 fuera del Reino Unido

A-dec., el logotipo de A-dec, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC y Radius son marcas comerciales de A-dec Inc. y están registradas en los EE. UU. y en otros países. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 y reliablecreativesolutions también son marcas comerciales de A-dec Inc. Ninguno de los nombres de marcas ni las marcas comerciales de este documento pueden ser reproducidos, copiados o manipulados de ningún modo sin la aprobación expresa y por escrito del propietario de la marca comercial.

Algunos símbolos de los paneles táctiles son propiedad de A-dec Inc. Se prohíbe estrictamente cualquier uso de estos símbolos, en su totalidad o en parte, sin el previo consentimiento por escrito de A-dec Inc.

Los colores y productos mostrados pueden diferir de los materiales reales y están sujetos a cambios sin previo aviso. Comuníquese con su distribuidor de A-dec autorizado para obtener muestras de colores exactos y la información más reciente sobre los productos.



© 2019 A-dec Inc. Todos los derechos reservados.  
85.0093.27/PP/1M/3-18(5-19)/Rev C5