

Un sistema, tres colores, un composite fluido simplificado para todo tipo de cavidades



Composite Solventum™ Filtek™ Easy Match Fluido

Nuestro innovador composite fluido está desarrollado para simplificar su procedimiento de trabajo abarcando todas las restauraciones directas, incluidas las superficies oclusales, las carillas y todos los procedimientos, también para el moldeo por inyección.

¡Es hora de incorporar un nuevo composite fluido a su práctica diaria! Nuestro composite fluido, prácticamente libre de burbujas, complementa al composite universal 3M™ Filtek™ Easy Match. Solo tres tonos ofrecen un ajuste excelente al color de las sonrisas de la mayoría de los pacientes.

Los dos composites ofrecen una selección intuitiva del color, una opacidad naturalmente adaptable y los niveles excelentes de retención del pulido y resistencia al desgaste que espera de los materiales de restauración Filtek, gracias a nuestra auténtica nanotecnología.

Además, se pueden utilizar con el calentador de composite Solventum™ Filtek™ portátil, rápido y fácil de usar.



Bright (B): A1, B1, B2, C1, D2



Natural (N): A2, A3, C2, D3, D4




Warm (W): A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Con opacidad naturalmente adaptable

Proporciona una translucidez parecida a la del esmalte donde se necesita y una translucidez parecida a la de la dentina en el resto, sin necesidad de utilizar bloqueador.

Comparación de composites fluidos

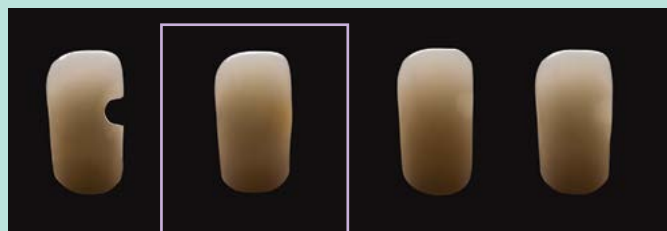


Preparación

Composite Solventum™ Filtek™ Easy Match Fluido, sin necesidad de bloqueador

Tokuyama OMNICHROMA FLOW, sin usar bloqueador Tokuyama OMNICHROMA FLOW, con bloqueador

Comparación de composites universales

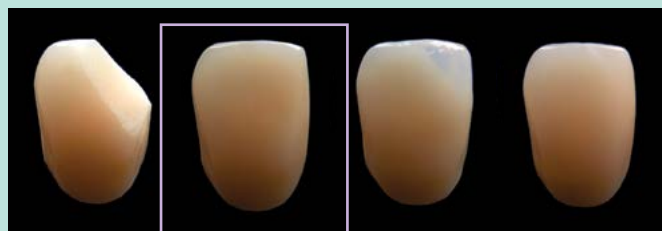

Preparación

Composite universal 3M™ Filtek™ Easy Match, sin necesidad de bloqueador

Tokuyama OMNICHROMA®, sin usar bloqueador Tokuyama OMNICHROMA®, con bloqueador

Composite Solventum™ Filtek™ Easy Match Fluido



Nº de referencia	Descripción
Bright	
6225B	2 Jeringas, 2 g cada una 1 Bolsa de puntas / 20 unidades
Natural	
6225N	2 Jeringas, 2 g cada una 1 Bolsa de puntas / 20 unidades
Warm	
6225W	2 Jeringas, 2 g cada una 1 Bolsa de puntas / 20 unidades
Kit de introducción	
6225K	3 Jeringas, 2 g cada una: 1 de cada uno de los colores Bright, Natural y Warm 2 Bolsas de puntas / 20 unidades

Composite Universal 3M™ Filtek™ Easy Match



Nº de referencia	Descripción
Bright	
6210B	20 Cápsulas, 0.2 g cada una
6220B	1 Jeringa, 4 g cada una
Natural	
6210N	20 Cápsulas, 0.2 g cada una
6220N	1 Jeringa, 4 g cada una
Warm	
6210W	20 Cápsulas, 0.2 g cada una
6220W	1 Jeringa, 4 g cada una
Kit de introducción	
6210K	60 Cápsulas, 0.2 g cada una: 20 de cada uno de los colores Bright, Natural y Warm
6220K	3 Jeringas, 4 g cada una: 1 de cada uno de los colores Bright, Natural y Warm



- ✓ Rápido
- ✓ Fácil
- ✓ Portátil



Tanto el composite Filtek Easy Match Fluido como su versión en pasta se pueden calentar con seguridad^{1,2} y son compatibles con **el calentador de composites Solventum™ Filtek™**.

6520K	Solventum™ Filtek™ Kit de calentador de composite Incluye calentador con base calefactora y soporte para composite, cable USB-C fijo, enchufe de alimentación, adaptador para toma de pared y guía de inicio rápido.
-------	--

- 1 Caliente las cápsulas hasta 70 °C durante 1 hora como máximo.
- 2 Caliente las jeringas de composite fluido hasta 70 °C durante 1 hora como máximo, hasta 25 veces.



Solventum Dental Solutions

KCI Clinic Spain, S.L.U.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25, 28027
Madrid · España
solventum.com

Los composites Filtek de Solventum son productos sanitarios de uso exclusivo por profesional y ostentan un marcado CE (2797). Lea atentamente las instrucciones de utilización para un uso de forma segura y eficaz. Solventum US LLC. Noviembre 2026.

© Solventum 2026. Solventum, el logotipo de la "S" y Filtek son marcas comerciales de Solventum o sus filiales. 3M y el logotipo de 3M son marcas comerciales de 3M. Todas las demás marcas comerciales indicadas son marcas de servicio, marcas comerciales o marcas registradas de sus empresas respectivas. OMG2033955.